



PIENI RATKAISU VÄLITTÖMIN TULOSSIIN

Navina™ Mini voi helpottaa lapsen suoliongelmia.
Intuitiivinen apu ummetukseen ja tuhrimiseen.

Navina™ Mini

OLE HALLINNASSA NAVINA MININ AVULLA

Suolisto-ongelmien kanssa eläminen on haastavaa lapselle ja koko perheelle.

Hoitajana olet todennäköisesti pitkään kokeillut erilaisia lähestymistapoja, kuten ruokavalion mukauttamista ja ulostetta muuttavia lääkkeitä, kuten laksatiiveja tai ulosteen pehmentimiä, tehokkaiden ratkaisujen löytämisen toivossa.

Nämä haasteet ovat yleisempiä kuin luullaan, mutta niistä ei usein puhuta. Onneksi on olemassa ratkaisuja, kuten käyttäjäystävällinen Navina Mini, joka tukee lasta hyvän suolentoimitusrutiinin palauttamisessa.

PIENI RATKAISU VÄLITTÖMIIN TULOKSIIN

Navina Mini on huomaamaton ja intuitiivinen matalan volyymin huuhtelulaite, joka voi auttaa oireisiin, kuten epätäydellinen tyhjeneminen ja tuhriminen.


Sen avulla peräsuolen voi tyhjentää hellävaraisella vesihuhtelulla ja saada välitöntä helpotusta sekä estää karkailua.



MITEN SUOLISTO TOIMII?

Kuvittele, että vatsa on kuin iso kone.

1. Syömisen jälkeen ruoka sulaa vatsassa.
2. Sen jälkeen ruoka siirtyy ohutsuoleen, jossa ravintoaineet imeytyvät. Sitten sulanut ruoka siirtyy paksusuoleen, joka imee suolat ja veden ja muuntaa loput massasta ulosteeksi.
3. Uloste kulkeutuu sitten suolen loppupäähän.
4. Kun uloste saavuttaa peräsuolen, aivot saavat ulostussignaalin.

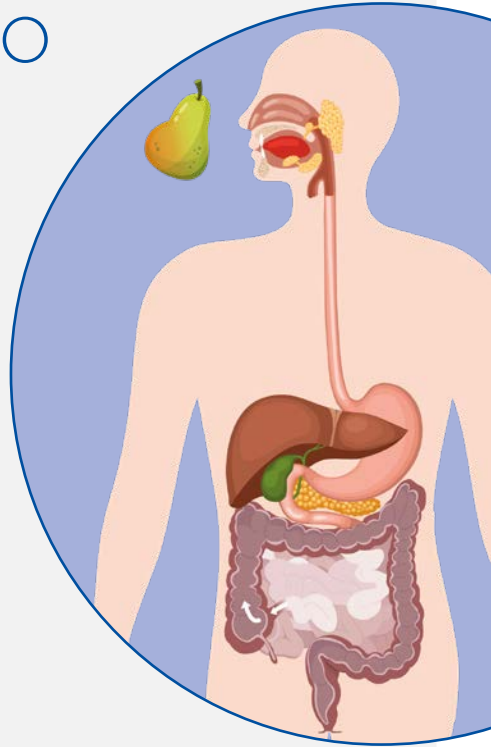

MITÄ KEHOSSA TAPAHTUU KUN SUOLI EI TOIMI?

Joskus tämä kone ei toimi niin kuin pitäisi ja se voi aiheuttaa ongelmia.

Suolen toimintahäiriöistä kärsivillä lapsilla voi esiintyä kipuja, turvotusta, ruokahaluttomuutta ja ulosteen pidätyskyvyttömyyttä monta kertaa päivässä. Tästä seuraa usein pahaa mieltä, häpeää ja sosiaalista epävarmuutta.

Monet perheet käyttävät huomattavasti aikaa yrittäessään hallita näitä ongelmia. Kaikella syömiseen, wc:ssä käymiseen tai sen yrittämiseen, likaantuneiden vaatteiden pesemiseen ja/tai vaippojen vaihtamiseen, hankautuneen ja kipeän takamuksen hoitamiseen käytetyllä ajalla on huomattava vaikutus päivittäiseen elämään.


Realistisesti ottaen tämä rajoittaa lapsen leikkiaikaa ja lapsen mahdollisuuksia osallistua sosiaalisiin aktiviteetteihin.

MITEN SUOLIHUUHTELU VOI AUTTAA


Matalan volyymin suolihuuhtelu tyhjentää tehokkaasti peräsuolen johtamalla vettä rektaalikartion avulla, joka auttaa saamaan ulosteen poistumaan.

Se ei sisällä lääkkeitä ja tarjoaa vaihtoehdon lääkkeille ja ruokavaliorajoituksille. Menetelmä ehkäisee vahinkoja ja antaa lapselle mahdollisuuden kontrolloida, milloin ja missä hän haluaa tyhjentää suolen.

Ennen suolihuuhtelua:

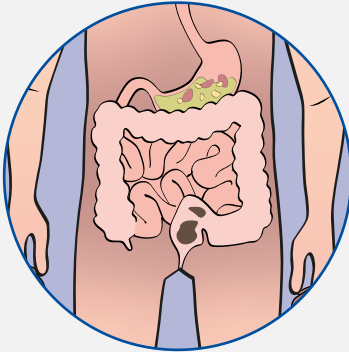

Suolihuuhtelun jälkeen:

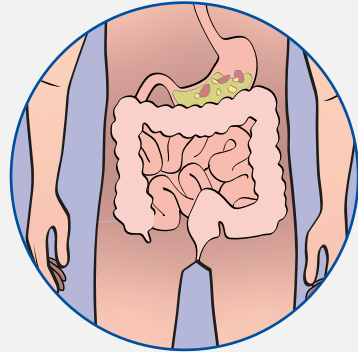

HARJOITTELU ON AVAIN

Olemme kaikki erilaisia ja niin ovat myös suolistomme. Siksi on tärkeää räätälöidä lapselle oma huuhtelurutiini. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua onnistumaan:

- Varmista, että terveydenhuollon ammattilainen antaa asianmukaista koulutusta ja opastusta suolihuuhtelua aloitettaessa.
- Anna lapsen osallistua prosessiin antamalla hänen harjoitella laitteen käyttöä pehmoeläimellä tai nukella, jolloin toimenpide ei ole niin pelottava.
- Aseta saavutettavia tavoitteita, jotka motivoivat lasta jatkamaan huuhtelua, vaikka aluksi epäöisikin.




Kokonainen koulupäivä ilman ulostevahinkoa



Uima-altaalla käynti



TAVOITTEENI:

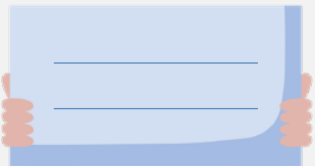

Mukava

Pyörästetty pää mukavaa asettamista varten.

185ml

Puristusystävälliseen vesisäiliöön mahtuu 185ml vettä.

60 Käyttökertaa

Kestävä muotoilu, vesisäiliötä ja valinnaista jatkoletkua voi käyttää enintään 60 kertaa.

Ergonominen

Muotoiltu käteen sopivaksi.

Lisää ulottuvuutta

Valinnainen jatkoletku, jotta ei tarvitse kurottaa. Voi käyttää enintään 60 kertaa.



PIENI RATKAISU VÄLITTÖMIIN TULOIKSIIN

Suolihuuhtelun ei tarvitse olla monimutkaista tai tuntua pelottavalta.

Navina Mini on huomaamaton ja intuitiivinen matalan volyymin huuhtelulaite, joka voi auttaa oireisiin, kuten epätäydellinen tyhjeneminen ja tuhriminen. Sen avulla peräsuolen voi tyhjentää hellävaraisella vesihuuhtelulla ja saada välitöntä helpotusta sekä estää karkailua.



RYHDY FLUSH-SANKARIKSI!

Suolihuuhteluun tottuminen saattaa viedä hieman aikaa.

Jotta toimenpide olisi hieman hauskempi, kehitimme Navina Flush Hero -mobiilipelin.

Harjoittele kakkahirviöiden ruiskuttamista ja tyhjennä suoli ennen kuin vesi loppuu kesken!



NAVINA MINI JA MINÄ

Tässä lyhyessä tarinassa Robin kertoo, miten hän käyttää Navina Miniä ja miten se auttaa hänen vatsaansa voimaan paremmin.



Hei, nimeni on Robin! Minulla oli ennen samanlaisia ongelmia kuin sinulla. Minulla oli vatsaongelmia pitkään.....




Kokeilin monia asioita, erilaisia ruokia ja lääkkeitä, mutta mikään ei parantanut oloani.




Se sai minut surulliseksi. Minua pelotti mennä ulos leikkimään, jos vaikka tapahtuu vahinko ja vatsaani sattui koko ajan.



Eräänä päivänä lääkäriini sanoi, että voisin ehkä kokeilla jotakin, jota kutsutaan suolihuuteluksi.

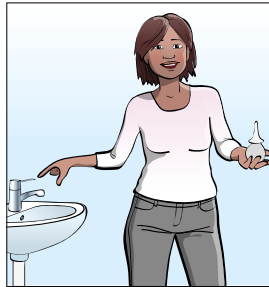

Hän sanoi, että sen kanssa käytetään vain vettä, eikä se satu.

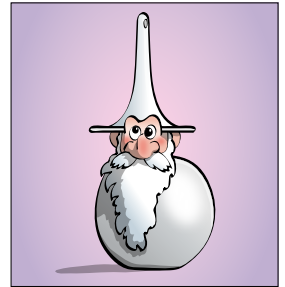

Aluksi en ollut varma. Se näytti vähän hassulta, melkein tontulta....




Mutta juteltuani lääkäriini kanssa päätin, että voisimme yrittää.




Tiesitkö, että ennen kuin täytät vesisäiliön vedellä, jos puristat sitä, se kuulostaa koiran lelulta!




...tämä ei ole sinulle Toby!

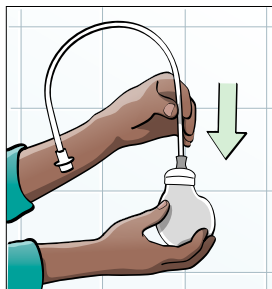


Näin se toimii! Täytä ensin vesisäiliö vedellä. Jos käytät jatkoletkua, kiinnitä seuraavaksi jatkoletku vesisäiliöön, se on hyödyllinen jos tarvitset aikuisen apua!

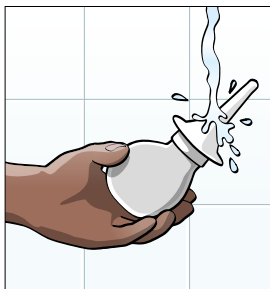

Sitten saan apua kartion kiinnittämiseen vesisäiliöön (tai jatkoletkuun) ja aktivoin sen vedellä - se on todella liukas!

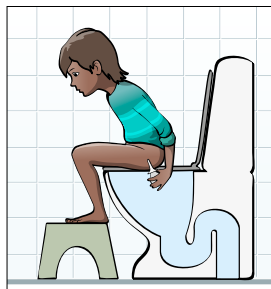


Istun wc-istuimelle ja laitan kartion peppuun. Ensimmäisillä kerroilla sain apua, jotta tein sen oikein.

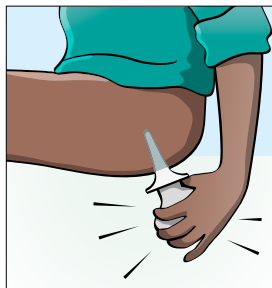

Kun kartio on paikoillaan, puristan vesisäiliötä niin, että vettä menee sisään. Sitten otan sen pois.




Sitten odotan, että kakka tulee ulos.

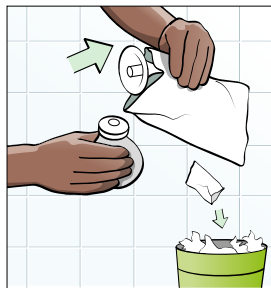

Saan yleensä apua laitteen puhdistamisessa, mutta kun olen vanhempi, teen sen itse.



Pesen aina loppuksi käteni saippualla ja vedellä.

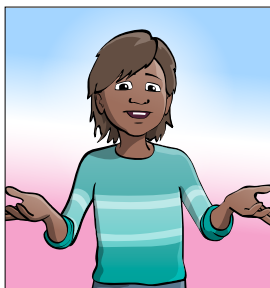

Ja se on siinä! Helppoa! Nyt tiedän, että kakka on tullut ulos, minulla ei ole enää vatsakipuja...



...eikä minun tarvitse olla huolissani siitä, että housuihin tulee vahinko!

Navina Mini

Käyttötarkoitus

Navina Mini on tarkoitettu suolihuuhteluun, jossa pieni määrä vettä johdetaan kertakäyttöisen rektaalikartion avulla peräsuoleen.

Käyttöaiheet

Navina Mini on tarkoitettu ulosteinkontinenssista ja/tai epätäydellisestä tyhjenemisestä kärsiviä aikuisia, nuoria ja yli 3-vuotiaita lapsia.

Vasta-aiheet

- Peräaukon tai paksu- ja peräsuolen ahtauma
- Aktiivinen tulehduksellinen suolistotauti
- Akuutti divertikuliitti ja divertikkelin paise
- Paksu- ja peräsuolen syöpä
- Iskeeminen koliitti
- Aiempi peräaukon tai paksu- ja peräsuolen leikkaus alle 3kk sitten

Koska luettelo ei välttämättä ole tyhjentävä, terveydenhuollon ammattilaiset ottavat aina huomioon myös yksilölliset tekijät.



Manufacturer:
Wellspect Health-Care,
Aminogatan 1, P.O.
Box 14,
SE-431 21 Mölndal,



Tuotenumero	Nimi	Tuoteseloste
6931000	Navina Mini Aloitussetti	1 vesisäiliö, 5 rektaalikartiota, 1 jatkoletku
6930700	Navina Mini Setti	1 vesisäiliö, 30 rektaalikartiota
6930800	Navina Mini Setti jatkoletkulla	1 vesisäiliö, 30 rektaalikartiota, 1 jatkoletku
6930900	Navina Mini Kartiosetti	30 rektaalikartiota

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkiemme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta Wellspect.fi. Osallistu keskusteluun Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä.

wellspect.fi

