

# UUSI MAHDOLLISUUS POTILAASI TURVALLISEEN OLOON

Navina Fecal Incontinence Insert on innovaatio, joka on suunniteltu estämään ulosteinkontinenssivahingot.

**Navina**™

# KÄÄNNE HUOLESTA UUTEEN TOIVOON

Mitä elämänlaatu todella on? Tätä on kysyttävä sellaiselta, jolla on suolistovaivoja ja joka ei voi poistua kotoaan ulosteen karkailun ja kiusallisten vahinkojen pelon vuoksi. Kun koko ajan on pidettävä mielessä, että lähellä on wc, elämä muuttuu hyvin rajoitetuksi. Itse asiassa se voi johtaa viivästyneeseen hoitoon, eristäytymiseen ja masennukseen.

Wellspect esittelee kätevän ratkaisun, joka on suunniteltu auttamaan ulosteinkontinenssin oireiden hallitsemisessa. Tämä uusi innovaatio on pehmeä ja joustava Navina Fecal Incontinence Insert, joka on valmistettu silikonista ja nesteestä. Se perustuu nestedynamiikkaan, mikä saa tuotteen mukautumaan kehoon ja auttaa estämään ulosteen karkailun.

“En sano tätä kovin usein, mutta olen erittäin tyytyväinen tähän tuotteeseen. Mielestäni se saa aikaan todellisen muutoksen potilaitteni elämässä.”


Bev Collins, Johtava kliininen sairaanhoitaja  
Wellspect Healthcare, Iso-Britannia



## OHJE VAIHE VAIHEELTA




**1.** Pidä kiinni esikostutetun rektaalitamponin valkoisesta muoviasetimesta ja kohdista tuotteen kärki peräaukkoon.

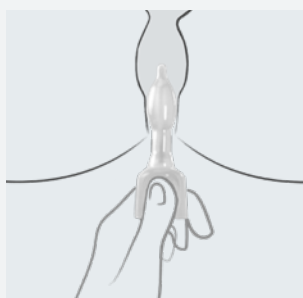

**2.** Työnnä rektaalitamponia varovasti, kunnes pidin on peräaukon suulla. Vedä asetin pois ja hävitä se sekajätteiden kanssa.



**3.** Nestetäytteinen rektaalitamponi mukautuu kehoon ja auttaa estämään ulosteen karkailua.

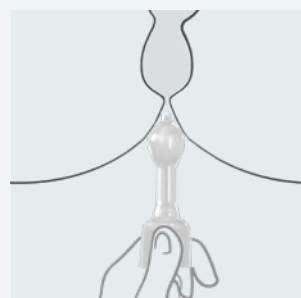

**4.** Poista tarttumalla pitimeen ja vedä tuote varovasti ulos. Hävitä sekajätteiden kanssa.



## INNOVATIIVISELLA SUUNNITTELULLA LISÄÄ HYVINVOINTIA

Joustava, nestettä sisältävä rektaalitamponi mukautuu ja asettuu kehon liikkeisiin nesteeseen täyttäessä koko tuotteen. Tämän ansiosta se on helppo asettaa paikoilleen ja poistaa sekä miellyttävä käyttää. Navina Fecal Incontinence Insert -tuote on suunniteltu helppokäyttöiseksi, estämään ulosteen karkailu ja mahdollistamaan itsenäisen ja aktiivisen elämän.

- Suunniteltu suojaamaan tahattomalta ulosteen karkailulta peräsuolesta
- Suunniteltu miellyttäväksi
- Suunniteltu hygieeniseksi

### 24 TUNNIN KÄYTTÖ

Voidaan käyttää yhtäjaksoisesti enintään 24 tuntia

### HYGIEENINEN JA HELPPO-KÄYTTÖINEN

Muovinen asetin pitää rektaalitamponin tukevana asettamisen aikana ja auttaa pitämään sormet puhtaina.

### JOUSTAVUUS JA MUKAVUUS

Valmistettu pehmeästä silikonista ja täytetty nesteellä. Tuote on muotoiltu helposti paikoilleen asetettavaksi ja liikkeisiin mukautuvaksi.

### TURVALLISESTI PAIKALLAAN

Riittävän suuri ulkoinen pidin asettuu mukavasti ja on suunniteltu pitämään tuote tukevasti paikallaan.

### KAKSOISTIIVISTE

Ensinnäkin tuote asettuu peräaukkoa vasten ja tarjoaa tiivisteiden tahattoman karkailun estämiseksi. Toiseksi, tuote myötäilee peräaukokanavaa ja täyttää sen, jolloin sulki-lihasten paine sulkee kanavan estäen ulosteen karkailun.

TUTUSTU TÄNÄÄN.  
POTILAASI HYÖTYVÄT  
HUOMENNA.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset potilasesitteitä, ota yhteyttä Wellspectin asiakaspalveluun. [www.wellspect.fi](http://www.wellspect.fi)

## NAVINA FECAL INCONTINENCE INSERT - KUVAUS:

Fecal Incontinence Insert on pehmeä, joustava, nestetäytteinen rektaalitamponi, joka on suunniteltu estämään ulosteinkontinenssi. Tuote on epästeriili ja kertakäyttöinen.

### KÄYTTÖTARKOITUS

Rektaalitamponi on suunniteltu itse paikalleen asetettavaksi ja sitä käytetään estämään tahaton ulosteen karkailu peräsuolesta.

### KÄYTTÖAIHEET

Fecal Incontinence Insert on tarkoitettu ulosteinkontinenssista johtuvan tahattoman ulosteen karkailun hoitoon.

### VASTA-AIHEET

Älä käytä Navina Fecal Incontinence Insert -tuotetta lapsille.

Me Wellspectissä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka muuttavat ihmisten elämää. Olemme sitoutuneet kannustamaan käyttäjiämme itseluottamuksen ja itsenäisyyden nostamiseen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 30 vuoden ajan LoFric® ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Luomme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita virtsarakon ja suoliston hallintaan mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. Pyrimme intohimoisesti tulemaan ilmastoneutraaliksi ja tekemään tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotka innostavat meitä jatkuvasti parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

**Wellspect. A Real Difference.**

Lisätietoja tuotteistamme ja käynnistämästämme Advancing Continentence Care Together (ACCT) -ohjelmasta on osoitteessa [Wellspect.fi](https://www.wellspect.fi). Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)



Minnesota Medical Technologies  
2446 Henry Road Northwest  
Stewartville, MN 55976 USA  
507-533-0366  
[www.mnmedtech.us](https://www.mnmedtech.us)



Importer: Wellspect HealthCare  
(A division of Dentsply IH AB)  
Aminogatan 1  
PO Box 14  
SE-431 21 Mölndal  
Sweden  
[www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)



MPS Medical Product Service GmbH  
Borngasse 20  
Braunfels 35619  
Germany